

# MYTREX ANGEL


マイトレックス エンジェル

## 取扱説明書

保証書付

このたびはマイトレックス製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い下さい。  
この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

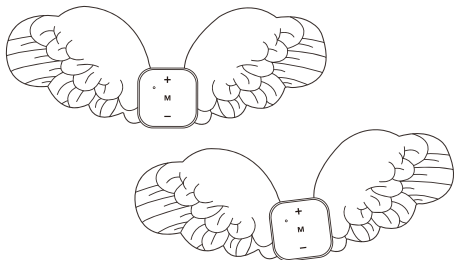

## 別売品

ウイングパッドは消耗品です。粘着面（ジェル面）が傷んだときは、弊社別売品をお求めください。

純正品以外のパッドは使用しないでください。

純正品以外を使用して発生したトラブルについては、一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

純正品の購入に関しては、お買い上げの販売店、または（株）創通メディカルお客様カスタマーサービスまで、お問い合わせください。

販売名：MYTREX Angel 交換用ウイングパッド  
型番：MEMS-1812GEL

# 1 安全上のご注意

ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

万一、異常が発生した場合は、ただちに使用を中止しカスタマーサービスへお問い合わせください。

本取扱説明書に従った使い方をせずに生じた損害に関しまして、弊社は一切の責任を負いかねます。



## 警告

誤った使い方をすると、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容。

- 次のような医用電気機器とは、絶対に併用しない。
  - ・ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
  - ・人工心肺などの生命維持用医用電気機器
  - ・心電計などの装着型医用電気機器



- 次のような方は使用しない。
  - ・心臓疾患のある方、血栓のある方
  - ・妊娠中の方、出産直後の方
  - ・乳幼児や子ども
  - ・自ら意思表示ができない方や操作が行えない方


- 次のような部位には使用しない。
  - ・胸部および肩甲骨などの心臓の周辺部位や首から上の部位（頭、顔など）
  - ・皮膚トラブル、傷口、整形手術をした部位
  - ・当日、脱毛処理をした部位
  - ・粘膜部位、関節、背骨（脊椎）
  - ・金属、プラスチック、シリコン等を埋め込んである部位
  - ・刺青（タトゥー）を入れている部位
  - ・生理中の腹部本書で指定している部位以外には使用しないでください。





## 禁止



- 用途目的以外の使用や、取扱説明書の使用方法以外で使用しない。
- 分解、改造、修理をしない。内蔵充電電池の交換を自分で行わない。
- 本製品に濡れた手で触らない。本製品に水などの液体をかけない。浴室などの湿気の多い場所や濡れた状態で充電・使用・放置しない。
- 火気に近づけたり、加熱しない。高温下で充電・使用・放置をしない。
- 落とす、ぶつけるなどの衝撃を与えない。
- 電極部に、金属類を接触させない。
- 他の電気製品・美容機器などと併用しない。
- 乳幼児、小さなお子様の手の届く場所やペットが触れる場所に保管しない。
- AC アダプターおよび USB コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工したりしない。また、重いものをのせたり、引っばったり、無理に曲げたりしない。
- 水回りでは充電、使用しない。
- 端子部分が一度曲がったり、コネクタ一部分が変形してしまった AC アダプターおよび USB コードは使用しない。
- 濡れた手で AC アダプターや USB コードの抜き差しはしない。

 <b>禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ACアダプターやUSBコードは根本までしっかり差し込み、差し込みがゆるい場合は使用しない。</li> <li>●ACアダプターやUSBコードのプラグや差込口部分に液体、金属類、異物を付着させない。</li> <li>●運転中、睡眠中、食事直後、飲酒後は使用しない。トレーニングの目的以外で使用しない。</li> </ul>
 <b>必ず守る</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●万一、異常が発生したら本体の電源をオフにし、使用しない。また、充電をしているときはすぐにコンセントからACアダプターを抜く。</li> <li>●ACアダプターやUSBコードのほこりなどは、乾いた布で拭くなどして定期的に掃除する。</li> <li>●次のような方は必ず医師にご相談のうえ使用する。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・アレルギー体質、皮ふに知覚障害や異常のある方</li> <li>・血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方</li> <li>・薬を服用中の方</li> <li>・悪性腫瘍のある方</li> <li>・脳神経に異常を感じている方（てんかんなど）</li> <li>・糖尿病など、高度な末梢循環障害による知覚障害のある方</li> <li>・発熱（38℃以上）している方</li> <li>・安静を必要とする方、四肢の不自由な方</li> <li>・急性（疼痛性）疾患のある方</li> <li>・骨折や骨粗しょう症など、骨に異常のある方</li> <li>・ジェルパッド（粘着部分）が肌に合わない方</li> <li>・体調不良、身体に異常を感じている方</li> <li>・医療機関で治療中の方</li> </ul> </li> </ul>


 **注意** 誤った使い方をすると、「人が障害を負う可能性、物的損害の発生が想定される」内容。

 <b>禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使用前に、必ず製品に破損、異臭、異音などの異常がないか、正常に作動するかを確認し、問題がある場合は使用をしない。</li> <li>●むやみに強くしたり、連続で長時間使用しない。筋肉疲労や、皮ふのヒリヒリ感、赤みやかぶれの原因となるおそれがあります。</li> <li>●使用中に電子機器を本体に近づけない。誤作動する恐れがあります。</li> <li>●充電するときは、たこ足配線をしない。事故や感電、発火などのおそれがあります。</li> <li>●ウィングパッドは他の人と共有しない。</li> </ul>
 <b>必ず守る</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使用する部位に本体を貼り付けてから、電源を入れる。使用後は、必ず電源を切ってから本体を身体から剥がす。強いショックを受けるおそれがあります。</li> <li>●本品を使用するときは、金属類、アクセサリ類を外す。強いショックを受けるおそれがあります。</li> <li>●本体の充電は、付属のACアダプターおよびUSBコードを使用する。</li> <li>●ACアダプターを抜くときは、コードを持たずに必ずアダプター本体を持って抜く。</li> <li>●使用中または使用後に痛みや不快感を感じたり、肌荒れ、発疹、赤み、かゆみ、やけど、炎症などの異常があらわれたりしたときは使用を中止し、医師に相談する。</li> <li>●身体や肌に異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、医師に相談する。</li> </ul>

## 2 各部の名称

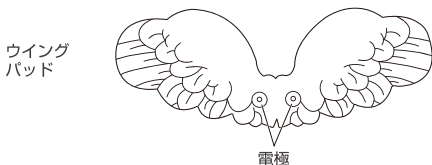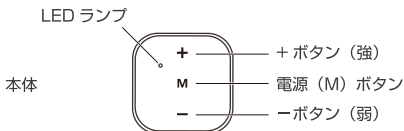

### 裏面

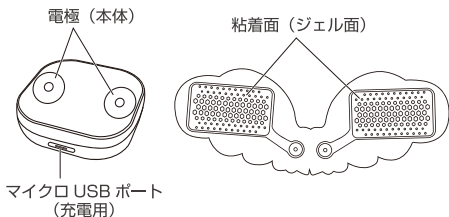

### セット内容

本体	2 個
ウイングパッド*	2 枚
専用 AC アダプター	1 個
専用 USB コード	1 本
保管用台紙	1 枚
取扱説明書	1 部

※ウイングパッドは消耗品です。

ウイングパッドは、ご使用を重ねるたびに、粘着面に付着した皮膚などにより、粘着力が低下します。そのままご使用になると、身体から電極パッドが剥がれたり、浮いたりし、火傷、発赤、痛みなどの原因になります。粘着面 (ジェル面) が傷んだり乾燥したときは、弊社別売品をお求めください。

## 3 ご使用の前に(充電方法)

初めてご使用されるときや、充電残量が減ったとき(赤ランプが5秒おきに連続3回点滅、1分おきに「ピーッ」となるとき)は、本体の電源をオフにしてから充電をしてください。

### ●充電時間の目安

充電時間	動作時間
約 2.5 時間	約 3 時間 (満充電時)

※充電推奨温度は 15℃～ 35℃です。推奨温度外では充電時間がのびたり、充電しない場合があります。


※電池の残量や充電環境等によって、充電時間や動作時間は前後します。

### 1 付属の AC アダプター、USB コード、本体を下図のように接続する。

※端子の形が一致するように、ゆっくりと根元まで押し込んでください。本体 2 つを同時に充電できます。

### 2 AC アダプターを壁面コンセントに差し込む。

※充電中、赤ランプが点灯します。

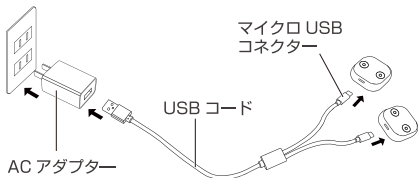

### 3 充電完了後、AC アダプターをコンセントから抜く。

※白ランプが点灯したら、充電完了です。

### 4 本体を USB コードから取り外す。


### ●内蔵充電電池の寿命について

充電電池は消耗品です。(保証はお買い上げ日から6か月です。) 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます。(充電回数は400回が目安です。)


電池寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。

## 4 ご使用方法

- 1 本体をウイングパッドに取り付ける。  
※本体の電源が切れていることを確認してから行ってください。左右の電極が確実にハマっているか確認してください。

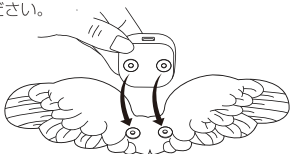

- 2 粘着面（ジェル面）の保護フィルムを剥がす。  
※ジェル面がウイングパッドから剥がれないように、ジェル面の端を爪で軽く押さえるなどして、ゆっくりと剥がします。

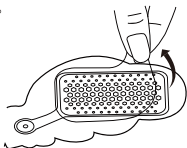

- 3 使用したい部位に貼り付ける。



注意


- 貼る前に電源を入れないでください。指などに通電すると強い痛みを感じる恐れがあります。
- 使用する部位の汗やボディクリームを拭き取ってから貼ってください。ジェル面の粘着が弱くなるおそれがあります。
- ジェル面は、必ず左右の粘着面全体を皮膚に密着させてください。ジェル面と肌の間に隙間があると、電気が均一に流れないため、強い刺激や痛みを感じる場合があります。
- ご使用箇所の体毛は処理されていたほうが、ジェル面がより肌に密着します。ただし、処理当日の使用はお控えください。
- 本品は防水仕様ではありません。水のかかる場所や湿度の高い場所では使用しないでください。
- 心臓の周辺部位や陰部などの粘膜部へは貼り付けないでください。
- 激しい運動では使用しないでください。汗の水分により、皮膚が炎症を起こしたりジェル面の粘着力がおちることがあります。

### ●使用可能部位

- ・お腹周り、腰周り
- ・太もも、ふくらはぎ
- ・二の腕
- ・お尻

## 4 ご使用方法

- 4 電源 (M) ボタンを押して、電源を入れる。  
※「ピー」と音がして電源が入ります。お任せトレーニングモード、強度レベル0 (刺激なし) の状態からスタートします。トレーニングを開始するには、モード選択後に+ボタンを押してください (手順5以降参照)。

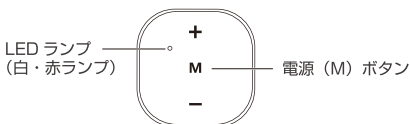

- 5 電源 (M) ボタンでモードを切り替える。  
※電源 (M) ボタンを押すたびにモードが切り替わります。

### ●お任せトレーニングモード (約 15 分間)

※本モード選択時、「ピッ」となり、白ランプが点滅します。お任せでトレーニングをしたいときに選択します。6種類の波形 (5Hz ~ 60Hz) を組み合わせしており、約 15 分間下記の波形を繰り返します。



### ●HIIT (ヒート) EMS モード (約 5 分間)


※本モード選択時、「ピピッ」となり、白・赤ランプが交互に点滅します。短時間のトレーニングで、最大のトレーニング効果を引き出すモードです。

機器によるトレーニング (約 20 秒) と、自分で行うエクササイズ (約 40 秒) を 5 回繰り返します。



## 4 ご使用方法

- 6 + ボタンまたは-ボタンで、強度レベルを選ぶ。  
※20段階のレベルからお好みの強さを選びます。  
※電源を入れたり、モードを切り替えると、強度レベル0(刺激なし)からスタートします。+ボタンを押すと、トレーニングを開始します。  
※初めてお使いのときは弱いレベルからお使いください。慣れてきたら徐々にレベルを上げていきます。

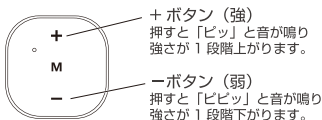


注意

- 同じ部位での使用は1日1回までにする。
- 15分以上の連続使用はしない。  
長時間で使用されると、筋肉を傷めたり皮膚に異常が発生する恐れがあります。
- ウイングパッドを貼り付けたまま放置しない。  
皮膚の炎症などをおこす恐れがあります。

- 7 電源(M)ボタンを3秒間長押しして、電源を切る。  
※「ピー」と音がして電源が切れます。  
※各モードが終了すると、自動的に電源が切れます。

- 8 ウイングパッドを身体から剥がす。  
※電源が切れていることを確認してから剥がしてください。ジェル面の端を軽く爪で押さえながら、端からゆっくり剥がします。

- 9 ウイングパッドを保管用台紙に貼り付ける。  
※台紙は両面で使用いただけます。

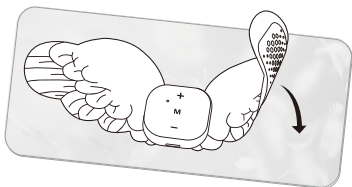



## 5 お手入れ・保管方法



注意

- お手入れは、必ず電源を切ってから行ってください。電源が入ったままお手入れをすると、強い刺激や痛みを感じる恐れがあります。
- シンナー・ベンジン・アルコールなどでは拭かないでください。
- ジェル面は必ず清潔な手で取り扱ってください。
- 本体に水分がかからないようご注意ください。
- ほこりの多い場所には保管しないでください。

### ●本体のお手入れ

- ①本体が傷付かないよう柔らかい布で汗や湿気を丁寧に拭き取ってください。
- ②汚れた場合はぬるま湯で希釈した中性洗剤に柔らかい布をひたし、よく絞ってから表面の汚れを丁寧に拭き取ってください。

### ●ウイングパッドのお手入れ

- ①指先に水滴をつけてウイングパッドのジェル面をやさしくこすり、汚れを取り除きます。
- ②ジェル面を上にし、風通しの良い日陰で表面の水気がなくなるまで自然乾燥させます。
- ③本体を台紙に貼り付けます。

※長時間または頻繁にお手入れをしないでください。ジェル面が傷んで、寿命が短くなるおそれがあります。

※ウイングパッドは消耗品です。ジェル面や電極周辺が傷んだり乾燥したときは、弊社別売品をお求めください。

### ●保管方法

台紙に貼って保管します。

※高温・多湿・直射日光を避け冷暗所で保管してください。

※ウイングパッドを折り曲げたり、ジェル面同士を接触させたりしないでください。破損や、粘着面が傷むおそれがあります。

※長期間保管する場合は、乾燥やホコリの付着を防ぐためにビニール袋などに入れることをおすすめします。

※長期間の不使用でウイングパッドに裂け目、破れ、ジェル面に乾燥や傷が見られた場合は、使用せずに新しいウイングパッドに交換してください。

※長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管します。また3カ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電しないでおくと充電ができなくなることがあります。

本製品(本体)はリチウムイオン電池を使用しています。本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



Li-Ion

## 6 故障かな?と思ったら

電源が入らない	電池残量が少ない 充電をしてください。
	電源ボタンを押しましたか? 電源 (M) ボタンを押してください。
充電できない	長期間保管で電池が完全放電した ご使用できません。完全放電させないように 3カ月に1度充電してください。
ジェル面が肌に 貼りつかない、 すぐに剥がれる ウイングパッド に傷みがある	ジェル面の保護フィルムが付いている 保護フィルムをはがしてください。
	粘着面 (ジェル面) が汚れている お手入れ方法に従って清浄してください。 お手入れを行っても粘着力が回復しない ときは、ウイングパッドの交換時期です。新 しいウイングパッドに交換ください。
電気刺激を感じ ない 電気刺激が弱い	電極周辺、粘着面 (ジェル面) が傷んだり、 乾燥したりしている 新しいウイングパッドに交換ください。
	粘着面 (ジェル面) が密着していない しっかりと密着させてください。
	粘着面 (ジェル面) が傷んでいる 新しいウイングパッドに交換ください。
	粘着面 (ジェル面) が汚れている お手入れ方法に従って清浄してください。
	レベル設定が低くありませんか? + ボタンを押し、レベルを上げてください。
	電池残量が少ない 充電をしてください。
電気刺激が強い 痛く感じる	皮膚が極度に乾燥している 皮膚を水で湿らせて再度使用ください。
	レベル設定が高くありませんか? - ボタンを押し、レベルを下げてください。
	粘着面 (ジェル面) が密着していない しっかりと密着させてください。
	粘着面 (ジェル面) が乾燥・傷んでいる 新しいウイングパッドに交換ください。
	使用時間が長すぎる 同じ部位には1日15分以上、連続して 使用しないでください。

※その他、異常がある場合はただちに使用を中止し、弊社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

## 7 主な仕様

品名	MYTREX Angel
型番	AEMS-1812
電源電圧	DC 5.0V ± 5% (リチウムイオン電池)
内蔵電池	65mA
外形寸法	縦 79× 横 210× 厚さ 9mm
材質	本体：ABS 樹脂 ウイングパッド：PET ジェル部分：アクリル系ポリマー 電極部：導電性銀
AC アダプター	入力：AC100-240V、50/60Hz 出力：DC5.0V、1.0A
USB コード	約 50cm
製造元	株式会社創通メディカル (日本) 原産国：中国 ジェルシート原材料：日本

※本製品は、医療機器ではありません。

※本品の性能向上のため、仕様の一部を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。