


MYTREX RAKUNO MAT

取扱説明書

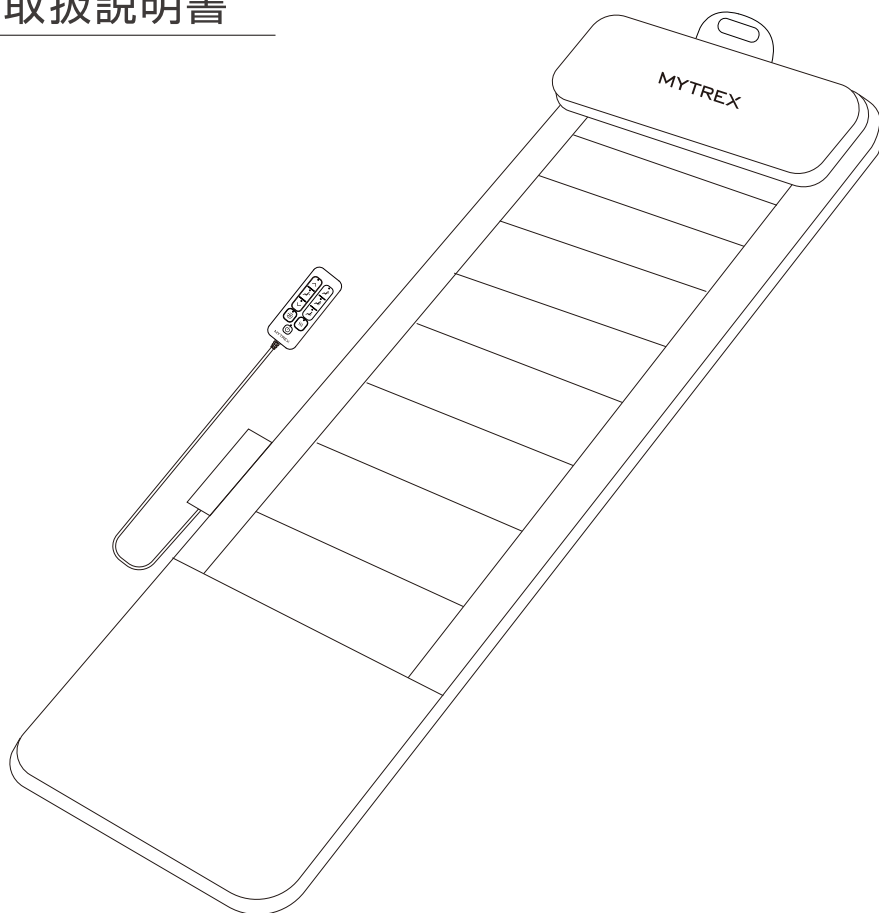

保管用

保証書付

このたびは本製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い下さい。この取扱説明書には保証書がついています。お読みになった後も、大切に保管して下さい。

安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。異常が発生した場合は、ただちに使用を中止しカスタマーサポートへお問い合わせください。故障状態のまま使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

ご使用になる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを説明しています。

警告表示について：誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を区分し、説明しています。



危険

誤った使い方をすると、「人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容を示しています。



禁止

してはいけない「禁止」内容を示しています。



警告

誤った使い方をすると、「死亡や重傷を負うおそれがある」内容を示しています。



必ず守る

必ず実行して頂く「強制」内容を示しています。



注意

誤った使い方をすると、「傷害を負う可能性や物的損害が発生するおそれがある」内容を示しています。



危険



禁止

次のような医用電子機器を使用している人は使用しない。

医用電子機器の誤動作をまねき、身体に著しい障害をもたらす恐れがあります。

- ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- 人工心肺など生命維持用医用電子機器
- 心電計などの装着型医用電子機器



警告



禁止

視覚障害のある方は1人で使用しない。

けがや体調不良の原因になります。

次のような方は使用しない。

事故や肌・身体のトラブルの原因になります。

- 心臓疾患のある方、血栓のある方
- 自ら意思表示ができない方や操作が行えない方
- 乳幼児や子ども
- 妊娠中、または妊娠の可能性のある方
- 医師にマッサージを禁じられている方
例) 血栓症、塞栓症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症
(皮下組織の炎症を含む。) など
- 骨折、整形などで背中や腰に埋め込み手術を受けた方
- 飲酒している方



禁止

次の部位には使用しない。

肌・身体トラブルの原因になります。

- 整形手術をした部位
- 皮膚の下に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる部位
- 皮膚トラブルのある部位
- 痛覚、知覚障害を起こしている部位
- 頭部、肘、膝、喉、胸、腹部

他の治療器との同時使用や、塗り薬（スプレー式などを含む）との併用はしない。

事故やけが、体調不良の原因になります。

体調が優れないときや、眠気がある時、飲酒時や、食後すぐは使用しない。

また、飲食・喫煙・運転をしながら使用しない。

事故やけがの原因になります。

首の周辺をマッサージするときは特に注意し、首の前方には使用しない。

事故やけがの原因になります。

小さな子供に使用させない。本製品で遊ばせない。ペットには使用しない。

事故やけが、体調不良の原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、定格容量以外での使用はしない。

破損・発火の原因になります。

高温になる場所（火のそば、こたつ、ホットカーペットの上、炎天下の車内など）で保管・使用しない。加熱したり、火中に投下しない。

発火や発熱、ヤケド、故障の原因になります。

本体のカバーを故意にはずしたり、破いたり、切ったりしない。破れがある場合は使用しない。

事故やけがの原因になります。

本体や付属品の差込口、すきまなどにピン、異物、ゴミ、水分を付着させない。

感電やショート、発火の原因になります。

電源コードを本体などに巻き付けない。

コードに負荷がかかり断線し、ショートによる火災などの原因になります。

ACアダプターおよび電源コードを破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。

また、重いものをのせ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。

感電、ショート、発火、故障の原因になります。

電源コードを抜くときは、先端部分を持ちコードを引っ張らない。

感電やショート、発火の原因になります。

警告



禁止

付属のACアダプター以外は使用しない。付属品は他の製品には使用しない。
故障や事故の原因になります。

ACアダプターおよび電源コードが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない。
感電やショート、発火の原因になります。



ぬれ手禁止

濡れた手で本体や電源プラグ、リモコンに触れない。
感電やショート、発火の原因になります。



水場禁止

本体および付属品に水をかけたり、浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。
火災や感電、けがの原因になります。



分解禁止

分解や修理、改造をしない。
発火したり、故障や事故の原因になります。



必ず守る

次のような方は医師と相談して使用する。
事故やけが、体調不良の原因になります。下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

- 悪性腫瘍のある方
- 血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方
- 薬を服用中の方
- 生理中の方、出産直後の方
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
- 皮膚に創傷や湿疹、はれものなど異常ある方
- 安静を必要とする方、四肢の不自由な方
- 体温38℃以上(有熱期)の方(例:急性炎症症状[けん怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期にある方、衰弱している方)
- 体調不良、身体に異常を感じている方
- 骨折、骨粗しょう症、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性疾患(疼痛性)のある方
- 背骨に異常のある方、背骨が左右に曲がっている方
- 腱鞘炎、むち打ち症、頸椎損傷、脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニアの方

警告



必ず守る

次のような方は医師と相談して使用する。

事故やけが、体調不良の原因になります。下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

- 医療機関で治療中の方
- かつて治療や手術を受けたところ、または疾患部へ使用する方
- 体力が極端に衰えた方
- 自ら意思表示ができない方や操作が行えない方
- 神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質、皮膚病、アトピー性皮膚炎、敏感肌の方

本機器はヒーターを内蔵しており、使用中に表面が熱くなるため、熱に敏感でない方は十分注意を払って使用する。下記に該当する場合は特に注意する。

低温やけどや脱水症状の原因になります。

- お年寄り、ご病人、ご自分で操作ができない方
- 皮膚の温感(温度感覚)の弱い方
- 眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方
- 深酒・疲労の激しい方
- 血行障害(糖尿病など)の方
- 医師より注意を受けている方

使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談する。

医師に相談のうえ指示に従ってください。

本製品を使用するときは、使用部位から金属、アクセサリ、ベルト類を外す。

また、マフラーなどは外して使用する。

事故やけがの原因になります。

しばらく使用しても効果が表れない場合は、使用を中止し医師または専門医に相談する。

体調不良の原因になります。

電源プラグはタコ足配線にせず、壁のコンセントに直接根元まで差し込む。

火災・感電・故障の原因となります。

本体および付属品が、異臭・異常発熱したときは使用を中止する。

破損・発火の原因になります。



電源プラグ
を抜く

本体および付属品から異臭・異音・煙が発生した場合、内部に水などの異物が入り込んだ場合は、直ちに使用を中止しコンセントから電源プラグを抜く。

体調不良の原因になります。

注意



禁止

家庭用マッサージ器以外の用途には使用しない。また、頭やけい部へは使用しない。
事故やけが、故障の原因になります。

本体の上に立ったり、座ったりして使用しない。
事故やけが、故障の原因になります。

同一箇所過度に集中して使用しない。
事故やけが、体調不良の原因になります。同一箇所への使用は3分以内を目安として
ください。

使用中に、もみ玉を故意に強く押し当てるなどの無理な力をかけない。
事故やけが、体調不良の原因になります。

もみ玉が直接肌に触れての使用はしない。もみ玉面を床側にして使用はしない。
事故やけが、故障の原因になります。

ヒーターは長時間使用しない。同一箇所に長時間触れるような使い方をしない。また、
長時間布団などをかけて使用しない。
低温やけどや脱水症状の原因になります。比較的低い温度(40～60℃)でも、長時間
皮膚の同じ箇所に触れていると低温やけどになるおそれがあります。

体重が過度に本体にかかるような使用はしない。
事故やけが、故障の原因になります。

本体に2人以上乗らない。
故障やけがの原因になります。

使用中に眠らない。
事故やけがの原因になります。

作動中、もみ玉に手や指、足などを近づけない。
けがや体調不良の原因になります。

不安定な場所で保管しない。
また、本体や付属品を落としたり、ぶつけたりしない。
けがや本体が破損、故障する原因になります。

使用中は、リモコンや操作ボタンを使用者以外に触らせない。
けがや思わぬ事故の原因になります。

⚠ 注意



必ず守る

ご使用前に、各操作ボタンおよびタイマー(10分間)が正常に動作するか確認する。
動作不良があると、事故やけがの原因になります。

1回の使用時間は10分以内とし、1日2回までを限度として使用する。

筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、けがをまねくことがあります。
なお、複数の方が使用する場合は、連続使用の合計時間を30分以内としてください。
連続使用後は最低30分間以上機器を停止させてから再度ご使用ください。
本体が熱くなって、故障の原因になります。

慣れないうちは遅めのもみ速度および短時間から使用する。

強い刺激に慣れていないとけがの原因になります。

ベッドやソファで使用する際は、コードが首や身体に絡まないよう注意して使用する。

また、睡眠時にはコードが身体に触れたり近くにないようにする。

事故やけがの原因になります。

故障や不具合が生じた場合は、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートに
相談する。

お客様ご自身では分解や修理などをしないでください。保証の対象外となります。



電源プラグ
を抜く

お手入れする際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いた状態で行う。

火災や事故の原因になります。

停電したときや雷が鳴り始めたら、直ちに電源プラグをコンセントから抜く。

火災や感電、故障の原因になります。

セット内容

万一、セット内容に不足がございましたら、カスタマーサポートまでご連絡ください。

本体	MYTREX RAKUNO マット26	1台
付属品	専用ACアダプター	1個
	取扱説明書	1部
	添付文書	1部

※本書に記載のイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。


※デザインおよび仕様については、予告なしに変更することがございます。

各部の名称

本体


おもて

うら

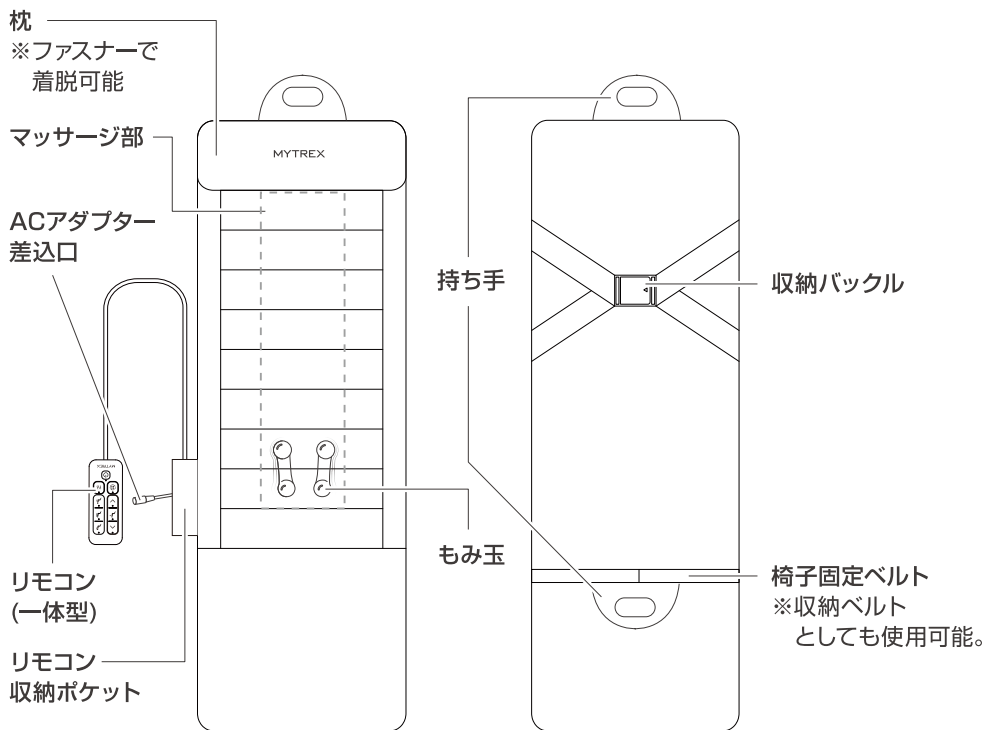

付属品

専用ACアダプター

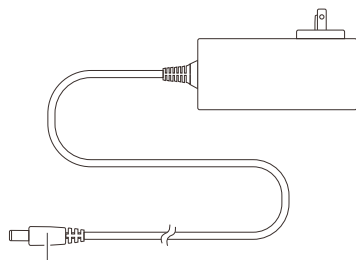

ACアダプタープラグ

操作ボタンと各機能

リモコン

△ボタン／▽ボタン

スポットボタンを短押ししたあと、△／▽ボタンのいずれかを長押しすると、もみ玉の位置を上下に移動します。ボタンから手を離すと選択した位置で、もみマッサージを行います。

※もみ玉可動範囲の一番上または下の位置になると、△／▽ボタンのLEDライトが消灯してお知らせします。

スポットボタン

短押しで自動コースを停止し、スポットコースを開始します。

速度切替ボタン

短押しで押すたびに「低速→中速→高速→低速→中速…」の順に切り替わります。

速さ	LED表示
低速	1回点滅→点灯
中速	2回点滅→点灯
高速	3回点滅→点灯



自動コース

いずれかのボタンを短押しすると自動コースが開始します。同じボタンを再度短押しすると、動作が一時停止します。

	上部ボタン 背中の上を重点的にマッサージします。
	全範囲ボタン 背中～腰まで全体をマッサージします。
	下部ボタン 背中の下部～腰を重点的にマッサージします。

ヒートボタン

短押しでヒーターをオン／オフします。

電源ボタン

短押しで電源をオン／オフにします。

はじめにお読みください

初回で使用前や、しばらく使用していなかった場合は、各操作ボタンおよびタイマー(10分間)が正常に動作するか確認してください。

異常が発見された場合はそのまま使用せず、カスタマーサポートにご相談ください。

本製品は、あんま、マッサージの代用を目的としており効果の表示が認められています。

使用目的または効果

疲労の回復

血行の促進

筋肉の
疲れをとる

筋肉の
こりをほぐす

神経痛・
筋肉痛の痛みを
やわらげる

※一般家庭で使用する。 ※上記以外の目的には使用しないでください。

設置方法

⚠ 注意

※キャスター付きの椅子や回転椅子では使用しないでください。転倒による事故やけがの原因になります。

※リクライニング機能のついた椅子でご使用になる場合は、使用中に背もたれを倒したりしないよう、十分ご注意ください。

※椅子に設置する際や本製品を移動する際は、リモコンやACアダプターを引きずらないよう、リモコンは本体側面のリモコン収納ポケットに収納し、ACアダプターは本体から外してください。

※床や椅子に傷がつく恐れがある場合は、本体との間に傷防止用の敷物などを挟んでください。

設置方法

本体を設置する前に、収納バックル→椅子固定ベルトの順に外し、本体を広げてください。


床で使用する場合

1 床やベッドなどに本体を設置する。

※枕は頭をのせて使用できます。お好みにより、枕を取り外して使用することもできます。

※本体の下に物を置かないでください。本体や床面、または物を傷つけるおそれがあります。

※床で使用する際に痛みを感じる場合は、ベッドやソファなどの柔らかい場所でご使用ください。

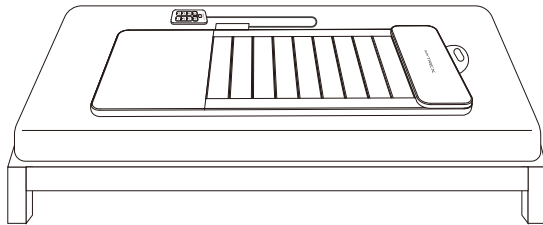

椅子で使用する場合

1 安定した背もたれのある椅子やソファなどに本体を設置する。


※椅子固定ベルトで椅子に固定することもできます。



2 本体のACアダプター差込口にACアダプタープラグを接続し、コンセントに電源プラグを根元までしっかりと差し込む。

※ACアダプター差込口は、リモコンポケットに裏側にあります。

※正確に、確実に差し込むように注意してください。

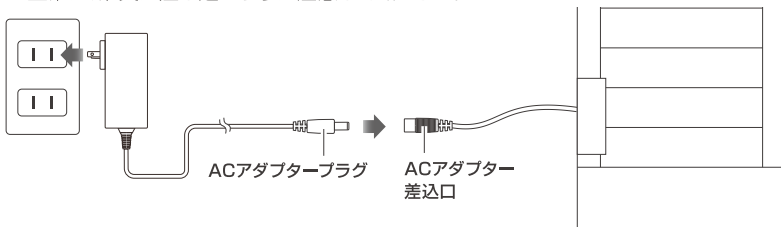

ご使用方法

- 1 電源がオフになっていることを確認してから、本製品の上に横になるか、本製品が設置されている椅子に深く座る。

※本体の上に立ったりするなど、体重が過度にかかるような使用はしないでください。

- 2 リモコンの電源ボタン()を短く1度押してオンにする。

●全範囲コース、ヒートオン、もみ低速で動作を開始します。

※もみ玉が収納位置にない場合は、収納位置まで戻って電源がオフになる場合があります。

- 3 コースを選択する。

自動コースの場合

※上部ボタン()、全範囲ボタン()、下部ボタン()のいずれかお好みのボタンを押してコースを選択すると、自動でもみマッサージを行います。

コースの詳細については、「操作ボタンと各機能」(9ページ)をご参照ください。

※ご使用中のボタンを再度短押しすると、動作が一時停止します。

スポットコースの場合

※スポットボタン()を短く1度押したあと、△ボタン/▽ボタンのいずれかを長押しして、もみ玉をお好みの位置に調整します。

※ボタンから手を離すと、選択した位置で、もみ玉がわずかに上下に動きながら同じ箇所を集中的にもみます。

- 4 もみ速度を調整するには、速度切替ボタン()を押す。

※速度は3段階から選択できます。

※ボタンを押すたびに「低速→中速→高速→低速→中速…」の順に切り替わります。

- 5 ヒーターをオフにするには、ヒートボタン()を押す。

※ボタンを押すたびに、オン/オフが切り替わります。

※ヒーターの温まりには数分間かかります。温かさの感じ方には個人差があり、周囲の温度などの使用環境によっても体感が異なります。

- 6 途中でマッサージを終了する場合は、電源ボタンを押してオフにする。

※リモコンの電源ボタンのLEDランプが点滅しながら、もみ玉がゆっくり収納位置まで移動し、マッサージが停止して電源がオフになります。

※動作開始から10分間が経過すると自動で電源がオフになります。

お手入れ・保管方法

お願い

長くお使いいただくために次のことにご注意ください。

- お風呂上がりなど、体が汗ばんだ状態で使用しないでください。
- 整髪料や化粧品をご使用の場合は、触れる部分にタオルなどを敷いてください。化学変化による生地の変色や劣化の原因になります。
- ジーンズや色柄ものなど、色落ちしやすい衣類での使用はしないでください。合成皮革部・布地部への色うつりの原因になります。
- ビニール製品や壁紙に長時間接触させないでください。生地が変色する原因になります。

お手入れ方法


- 定期的にお手入れを行ってください。
- 必ず電源プラグをコンセントから抜いてお手入れをしてください。
- 本体および付属品は絶対に水洗いしないでください。
- 乾いたやわらかい布で本体およびリモコンの汚れをふき取ってください。
- 汚れが気になる場合は、ぬるま湯で希釈した中性洗剤に柔らかい布をひたし、よくしぼってから本体表面の汚れを丁寧に拭き取ってください。その後、乾いた布で乾ぶきをしてください。
- アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

保管方法


- 使用後は本体の電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜いて保管してください。
- 電源コードがねじれている場合は、ねじれを直して保管してください。
- 汚れやホコリが付着しないよう、カバーなどをかけて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 乳幼児や小さなお子様の手の届く場所や、ペットが触れる場所、本製品でつまずくような場所での保管はおやめください。
- 本製品は、下記の手順で折りたたんで保管できます。

必ず動作が停止したことを確認してから折りたたんでください。

- ①リモコンポケットを内側へ折りたたむ。
- ②本体の下側を内側へ折りたたむ。
- ③その上に枕側を折り重ねる。

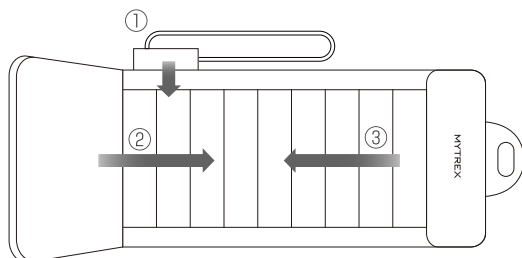

- ④収納バックルを「カチッ」と音ができるまでしっかり留める。
- ⑤椅子固定ベルトを本体に巻き付け、面ファスナーで固定する。

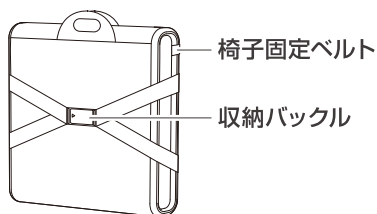

廃棄について

- 廃棄する際は、各自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。

故障かな?と思ったら

お問い合わせの前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときは、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートにご連絡ください。絶対に分解したり、修理や改造はしないでください。

症状	確認していただくこと
電源を入れても動かない	●本体とACアダプターが正しく接続されているか確認してください。
異音がする	●物が無い床やベッドの上もしくはクッション性のある椅子やシートの上に設置してください。 ●本体の下や周辺に接触しているものがないか確認してください。 ●本製品は、構造上、ある程度の動作音がするため異常ではありません。
突然停止した	●自動コース選択中に、再度同じボタンを押すと動作が一時停止します。 ●タイマーにより開始から10分で停止します。 ●長時間連続して使用していませんか？ モーターの温度上昇のため、安全装置が働いています。しばらく本体を停止させてください。(1時間程度) ●無理な力がかかっていませんか？ 本体に無理な力がかかると安全装置が働き止まることがあります。ACアダプターを差し直し、もう一度操作しなおしてください。

製品仕様

ブランド	MYTREX (マイトレックス)
販売名	MYTREX RAKUNO マット26
型番	MT-WRM-25W/MT-RM-25W(ホワイト) MT-WRM-25G/MT-RM-25G(グリーン)
本体定格	動作時 24V $\overline{\sim}$ 48W ACアダプター接続時 100V $\sim$ 50/60Hz 48W
ACアダプター	入力:100V $\sim$ 50/60Hz 1.5A 出力:24V $\overline{\sim}$ 2A (型番:EA060-2400-2000WJ)
サイズ	展開時:約1190mm×405mm×87mm 折畳時:約385mm×405mm×185mm (展開時、折畳時ともに持ち手・枕を含まず)
質量	約2.95kg(ACアダプターを除く)
素材	PVC、ポリエステル
電源コード長	約1.8m
使用環境	温度:5℃～35℃、相対湿度:≤90%RH
適応体重	約90kg
揉み回転数	高速:28±3回／分、中速:25±3回／分、低速:22±3回／分
定格時間	10分
一般的名称	家庭用電気マッサージ器(JMDNコード:34662000)
医療機器の種類	管理医療機器
医療機器認証番号	308AHBZX000024000
製造販売元	株式会社 創通メディカル
製造国	中国

MYTREX カスタマーサポート

製品についてご不明な点やお気づきの点がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。

営業時間9:00～17:30(土・日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

[電話でのお問い合わせ]

092-260-7366

[WEBでのお問い合わせ]

<https://mytrex.jp/support/>



MYTREX

発売元：株式会社創通メディカル

〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-1-10-5F

<https://mytrex.jp>

©2026 SOTSU MEDICAL CO., LTD.

202600KB