

MYTREX

REBIVE MINI

専用温熱アタッチメント



取扱説明書

保管用

保証書付

このたびは本製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い下さい。この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

ご使用前に必ずご確認ください

万一、セット内容に不足がございましたら、
カスタマーサポートまでご連絡下さい。

セット内容

- ・リバイブミニ専用温熱アタッチメント※1個
- ・取扱説明書（本書）1部

※本製品は、別売品のマイトレックスリバイブミニ (MT/BY-RBM20B) 専用の温熱アタッチメントです。その他の製品には使用できませんので、ご注意ください。


※マイトレックスリバイブミニ本体、ACアダプター、USBコードは本セット内容の構成品に含まれません。

ご使用の前に(充電方法)

初めてご使用されるときや、充電残量が減ったとき(ステータスランプ点滅時)は、リバイブミニ本体から取り外してから充電をしてください。

●電池残量低下時

ステータスランプ
(6つ点滅)

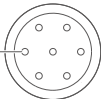


※充電時間の目安は約2時間、動作時間の目安は約1.5時間です。電池の残量や充電環境、使用環境によって大きく前後します。※充電推奨温度は15℃～35℃です。推奨温度外では充電時間がのびたり、充電しない場合があります。※初めての充電や、長期間ご使用にならなかった後に充電される場合、電池持続時間が短い場合があります。何度か充電・使用を繰り返すと正常に戻ります。

1

本体側面の充電ポートに、USBコードの
Type Cコネクター側を接続する。

充電ポート(Type C)

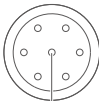

充電ランプ

充電中：点滅

充電完了：点灯

2

USBコードのTypeAコネクター側をお手持ちのACアダプター等のUSBポートに接続する。

・充電ランプが点滅し、充電を開始します。

※電源供給が可能なパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプター等のUSBポート(5V/2A または5V/1A)をお使いください。

※一部のパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプター、急速充電器では、充電ができない場合があります。

3

充電が完了したら、USBケーブルを取りはずす。

・充電ランプ点灯で、充電完了です。

ご使用方法

1

リバイブミニ本体の電源がオフになっていることを確認して、温熱アタッチメントを取り付ける。

※奥までしっかりと差し込んでください。

2

リバイブミニ本体の(①)ボタンを長押し(約3~5秒)して電源をオンにする。

・温熱アタッチメントが自動で起動し、加熱を開始します。

※約1、2分程度で温まります。使用環境によって異なりますが、本体温度は約55℃(体感温度は約45℃)まで上昇します。

※リバイブミニ本体が振動を停止すると、温熱アタッチメントの加熱も停止します。

お手入れ・保管方法

お手入れ方法

- 本体は絶対に水洗いしないでください。
- 本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。本体のストッパーゴム部分に、機器内の潤滑油等が付着していると本体が外れやすくなる場合があります。ストッパーゴム部分も同様に拭き取ってお手入れしてください。
- アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

保管のしかた

- 使用しないときは、USBコードを抜いてから保管してください。
- 高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管します。また1カ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。

充電池について

- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます。(電池寿命は、使用・保管などの状態により変化します。充放電可能回数の目安は300回～500回です。)
- 電池交換には対応していません。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管します。また1カ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電しないでおくと充電ができなくなることがあります。

本製品（本体）はリチウムイオン電池を内蔵しています。

本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



Li-ion

MYTREX カスタマーサポート

営業時間 9:00～17:30

(土・日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

[電話での
お問い合わせ] 092-260-7366

[WEBでの
お問い合わせ] <https://mytrex.jp/support/>



発売元：株式会社創通メディカル

〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-1-10-5F

<https://mytrex.jp>

Designed in Japan. Made in China.

©2021 SOTSU MEDICAL CO., LTD.

安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。異常が発生した場合は、ただちに使用を中止しカスタマーサポートへお問い合わせください。故障状態のまま使用されると、思いがけない事故や身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。



警告



禁止

- 本体の差込口、すきま、通気孔などにピン、異物、ゴミ、水分を付着させない。
感電やショート、発火の原因になります。

- ぬれた手で本体を触らない、USBコードの抜き差しはしない。
感電やショート、発火の原因になります。
- 指定の機器以外には使用しない。
リバイブミニ本体(別売)同梱のUSBケーブル以外は使用しない。
指定の機器以外を使用した場合、発熱や発火、破裂、故障の原因になります。
- USBケーブルが傷んだり、差し込みがゆるい時は使用しない。
感電やショート、発火の原因になります。
- 乳幼児や子供の手の届くところで使用、保管しない。
事故やけが、体調不良の原因になります。

- 本体を破損、重いものをのせ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。
感電、ショート、発火、故障の原因になります。
- 高温になる場所（火のそば、こたつ、布団、炎天下の車内など）で、保管・使用しない。加熱したり、火中に投下しない。
発火や発熱、ヤケド、故障の原因になります。

必ず守る

- 交流100V～240Vで使用する。海外での使用の際は必ずプラグ形状と電圧を確認のうえ使用する。ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。
火災・感電・故障の原因となります。

- 本体が異臭・異常発熱したときは、使用を中止する。
破損・発火の原因になります。
- 指定の電源、電圧で使用する。
誤った電源、電圧で使用すると火災、ヤケド、感電の原因になります。



アダプターを抜く

- 万一、異常が発生したら、本体の電源をオフにする。また、充電をしているときはコンセントからACアダプターをすぐに抜く。
けむり・異音・においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。



水場禁止

- 本製品に水をかけたり、浴室など湿気の多い場所や屋外で充電・使用しない。
火災や感電、けがの原因になります。



分解禁止

- 分解や修理、改造をしない。
発火したり、故障や事故の原因になります。

注意

禁止

- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。
事故やけが、故障の原因になります。
- 不安定な場所で保管しない。また、本体を落としたり、ぶつけたりしない。
けがや本体が破損、故障する原因になります。
- 30分を超えて連続使用しない。
本体が熱くなって、故障の原因になります。最低30分間以上は機器を停止させてから再度ご使用ください。

保証書

この保証書は、取扱説明書に従った使用状態で万一故障した場合に無償修理・交換等を行うことをお約束するものです。ご購入日から保証期間中に故障が生じた場合は、本製品、保証書、およびご購入日が確認できる証明書（レシート・納品書など）をご提示の上、弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

保証期間はご購入日より6ヵ月です。

1. 保証期間中であっても、以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた事故については本保証書は適用されません。
・取扱説明書どおりの使用方法をしなかった場合、保管上の不備による故障または損傷

- ・不当な取り扱い（誤操作・落下等）、改造、および修理による故障または損傷
- ・火災、落雷などの天災地変、公害、塩害、ガス害や異常電圧、その他外部要因における故障または損傷
- ・劣化、消耗による電池などの消耗品・付属品の交換
- ・一般家庭以外に使用された場合の故障または損傷
- ・公式販売店・正規販売代理店以外でご購入された場合の故障または損傷

- 保証期間中でも、商品を送付されるとき送料は原則としてお客様負担となります。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
- 製品を返送する際は、部品・パッケージなどを受け取ったままの梱包状態で返送して下さい。
- 本保証書は再発行できかねますので、大切に保管してください。
- 当社は修理保証の条項に対する修正権、及び最終的な解釈権を留保します。

製品仕様

ブランド	MYTREX (マイトレックス)
品名	REBIVE MINI 専用温熱アタッチメント
サイズ	約48×45×45mm
定格電源	DC 5V 2A*(USB)
消費電力	5W
電源供給元	ACアダプター/PC等のUSBポート
バッテリー	600mAh
使用環境	温度 5℃~40℃、相対湿度 ≤90RH%

*2Aを超えるものは使用しないでください。
(ACアダプターは市販のUSB対応の物をご使用下さい。)